


## ■製品スペック


### アルファブラ L 全面防水フィルムカバータイプ

型番	MB-LZ3R	MB-LZ1R
サイズ (cm)	幅83×長195×厚10	幅91×長195×厚10
質量 (kg)	6.9	7.6
TAISコード	-	-
希望小売価格 (税込)	106,700円	
全面防水フィルムカバーのみ	30,250円	

その他	設置方法:リプレースメント 材質(中身):ポリウレタンフォーム/シリコーンゲル 材質(カバー):表地:ポリウレタン 裏地:ポリエステル	 全面がウレタンフィルムで覆われたカバーです。カバー全面が清拭しやすく、汚物の浸透を防ぎます。
-----	---	--


### アルファブラ L 撥水・防水カバータイプ

型番	MB-LW3R	MB-LW1R
サイズ (cm)	幅83×長195×厚10	幅91×長195×厚10
質量 (kg)	6.9	7.6
TAISコード	00563-000101	00563-000103
希望小売価格 (税込)	106,700円	
撥水・防水カバーのみ	30,250円	

その他	設置方法:リプレースメント 材質(中身):ポリウレタンフォーム/シリコーンゲル 材質(カバー):表地:ポリエステル 裏地:ポリウレタン	 表面はさらっとした生地です。表地には撥水性を持たせ、裏地にはウレタンフィルムを使用し汚物の浸透を防ぎます。
-----	---	---







### アルファブラ L-W 抗ウイルス+抗菌 撥水・防水カバータイプ

型番	MB-LPW3R	MB-LPW1R
サイズ (cm)	幅83×長195×厚10	幅91×長195×厚10
質量 (kg)	6.9	7.6
TAISコード	00563-000183	00563-000185
希望小売価格 (税込)	115,540円	
抗ウイルス+抗菌 撥水・防水カバーのみ	32,670円	

その他	設置方法:リプレースメント 材質(中身):ポリウレタンフォーム/シリコーンゲル 材質(カバー):表地:ポリエステル 裏地:ポリウレタン	 表面はさらっとした生地です。表地には撥水性を持たせ、裏地にはウレタンフィルムを使用し汚物の浸透を防ぎます。
-----	---	---

●サイズ、質量は目安の数値です。●介護保険対象は全面防水フィルムカバータイプ以外のカバータイプです。

## ■マットレス比較表

	厚さ	体圧分散	リバーシブル	清拭・防水	抗ウイルス	抗菌	耐久性	寝返りサポート	端座位サポート	特長
アルファブラ Hp 	13cm	○	○	◎		○	◎	○	○	療養者に合わせ「Soft」面「Standard」面を選べるリバーシブルタイプ。
アルファブラ FII-W 	13cm	◎		○	○	○	◎	◎	○	ウレタンフォームマットレス最高クラスの体圧分散性能。抗ウイルス+抗菌W加工。
アルファブラ FII 	13cm	◎		◎		○	◎	◎	○	ウレタンフォームマットレス最高クラスの体圧分散性能。抗菌加工。
アルファブラ L-W 	10cm	○		○	○	○	◎	○	○	体圧分散と動きやすさを両立。抗ウイルス+抗菌W加工。
アルファブラ L 	10cm	○		◎		○	◎	○	○	早期離床・リハビリテーションに。体圧分散と動きやすさを両立。
アルファブラ すくっとRe 	8cm	△		◎		○	◎	○	○	スタンダードマットレスに体圧分散性能と動きやすさをプラス。

●表は次のカバータイプの場合です。アルファブラ FII-W、アルファブラ L-W:抗ウイルス+抗菌 撥水・防水カバータイプ、アルファブラ FII、アルファブラ L、アルファブラ すくっとRe:全面防水フィルムカバータイプ。

お問い合わせ先

**Taica Wellness**

株式会社タイカ ウェルネス事業本部

〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-39-4

TEL:03-5648-6630 FAX:03-5648-6640

ホームページ <https://taica.co.jp/pla/>

フリーダイヤル ☎0120-152047



2023.8.0000



**Taica Wellness**

**αPLA L / αPLA L-W**

アルファブラL / アルファブラL-W

早期離床・リハビリテーションに。  
体圧分散と動きやすさを両立。



# 相反する体圧分散と動きやすさ、安定性を兼ね備えたウレタンフォームマットレス。

## Feature. 1



### 体圧分散性能

高弾性無膜ウレタンフォーム

上層と中層に柔らかめの高弾性無膜ウレタンフォームを使用し、褥瘡が心配になり始めた方に適した体圧分散を行います。

重いボールを乗せてみると、一般的なマットレスでは沈み込まないため、体圧分散が十分にできませんが「アルファプラ L」の上では適度に沈み込みます。

#### ■体圧分散比較

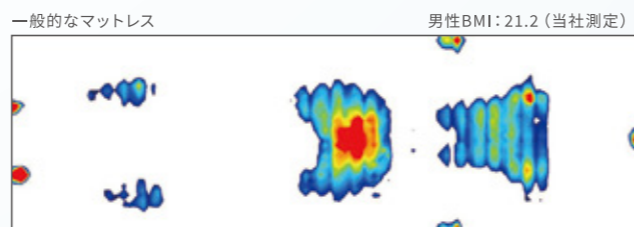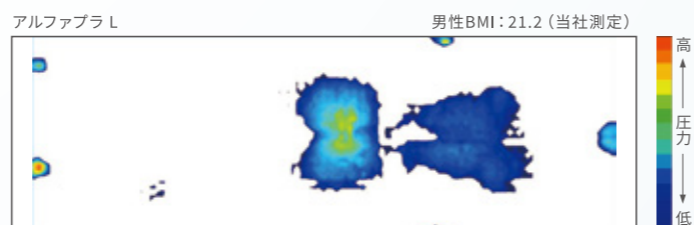

Alpha普拉 L



一般的なマットレス


## Feature. 2

### 動作サポート


高弾性無膜ウレタンフォーム

3層の高弾性無膜ウレタンフォームが、適度な弾力で身体を押し上げ、体位変換、起き上がり、ベッドからの離床や移乗といった一連の動作をサポートします。

#### ■安定性を求めた端部の構造

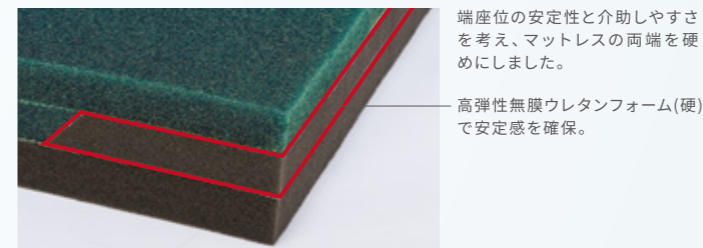

#### ■2.7kgのボールを動かすために要する力の比較

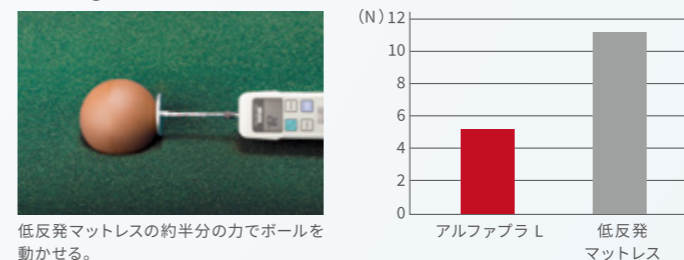


マットレス全体が押し返すような感覚で、早期の座位や立位の訓練をサポート。柔らかさに落差があると、不安定な姿勢に。

## Feature. 3

### ベッドアップ時の安定性

αGEL

中層のマットレス腰部に配置されたαGEL(アルファゲル)が、背上げ時の臀部の支えを安定させます。また、αGELにより臀部の底付きを防止します。

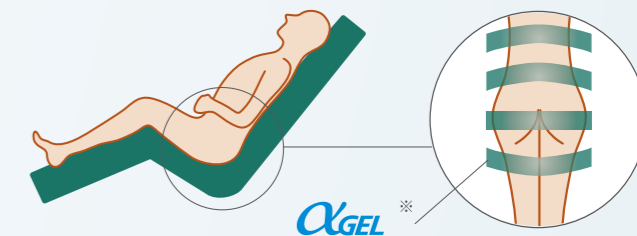

※αGEL(アルファゲル)は、タイカが開発したシリコンを主原料とするゲル状素材です。

## Feature. 4

Alpha普拉 L-Wのみ


### 抗ウイルス・抗菌のW加工カバー

エアロテクノ®PR

「Alpha普拉 L-W」のカバーには、エアロテクノ®PRによる抗ウイルス・抗菌のW加工を施しています。


抗ウイルスにおいては、2時間で99%以上の感染性ウイルス量の減少を確認しています。

#### ■感染性ウイルス量の変化(初期を100とした場合)

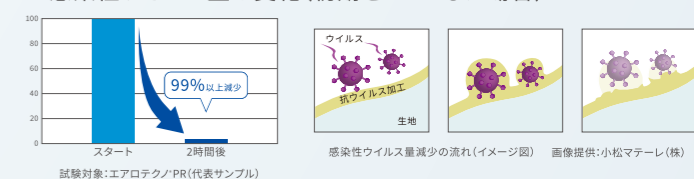


※「エアロテクノ®PR」は小松マテール株式会社が開発した抗ウイルス加工素材です。  
 ※実験室での試験結果であり、試験データは実生活での効果を保証するものではありません。  
 ※本製品は全てのウイルス、菌による感染を予防するものではありません。  
 また、ウイルス感染の治療を目的とするものではありません。

## For a better environment よりよい環境のために

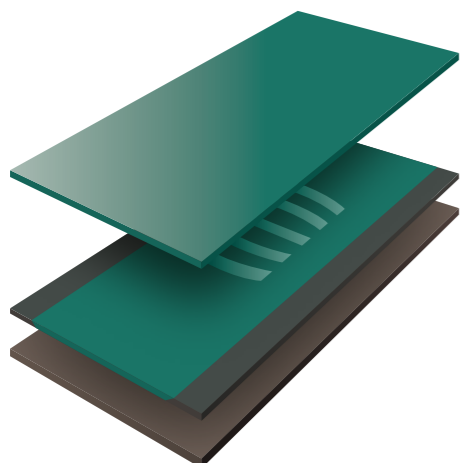


### マイクロクライメイトに配慮

無膜ウレタンフォームは、有膜ウレタンに比べて熱の放散性能が30%以上向上。近年、外的要因に影響を与える第4の要因として関心が高まっているマイクロクライメイト(皮膚局所温度・湿度)にも配慮しています。

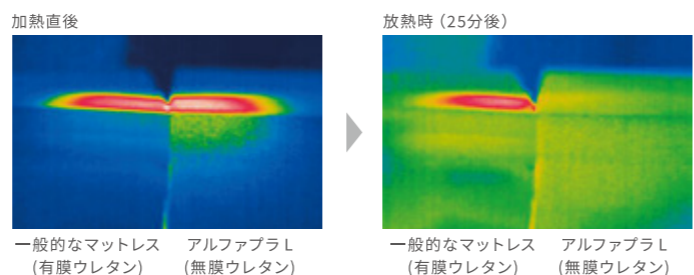

### 高い耐久性

JIS規格に準拠した試験方法による8万回の圧縮テストに加え、タイカ独自の高い基準を設定した試験をクリア。へたりにくく、長期間、安心してご利用いただけます。

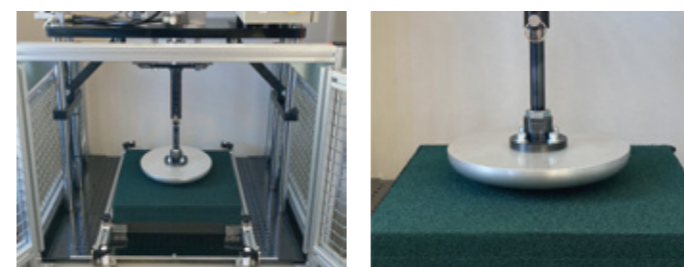

8万回の圧縮テスト

### 清拭可能

全面防水フィルムカバータイプは、アルコールや次亜塩素酸ナトリウム等で清拭が可能。血液、尿、薬品等による汚染を防ぎ、マットレスの清掃作業を助けます。



全面防水フィルムカバータイプ